



Blood collection tube



一次性使用人体静脉血样采集容器 Blood Collection Tube with Vacuum for Single Use



威高生基医疗科技有限公司
WEGO SHINGENE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址 | 山东省威海市临港经济技术开发区棋山路 688 号 电话 | 400-646-6666

网站 | www.weigaoholding.com 邮箱 | wecan@weigaogroup.com

WEGO 威高

产品特点 PRODUCT FEATURES


- 安全头盖颜色匹配各品牌标本前处理系统。
- 根据客户需求订制真空度，确保采血量精准。
- 标签订制灵活多样，序号、条形码、透明标签等形式。
- 国内唯一自有辐照灭菌系统的采血管生产商，灭菌间隔时间短，确保达到严格无菌要求。



双层管体

外层管壁 聚对苯二甲酸乙二酯 (PET) 材质
 ◎刚性更强，保持真空度和外形尺寸

内层管壁 聚丙烯 (PP) 材质
 ◎血小板激活率更低；
 ◎保证试剂浓度，保证抗凝剂最佳比例

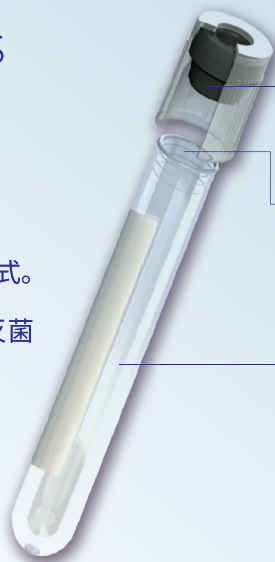

优质胶塞


无落屑，不堵塞探针

防脱塞结构设计

管口多棱线设计，强化真空保持度

全热流道技术管体

内壁洁净光滑耐冲击

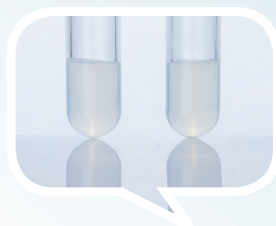

进口惰性分离胶

- ◎无油膜、无小分子基团析出，不堵塞探针；
- ◎血清 / 血浆与血细胞完全隔离

规格型号 SPECIFICATIONS AND MODELS

添加剂	规格型号 (ml)
促凝剂 / 无添加剂	3、 4 、 5 、 6、7、8、 9、10
促凝剂 + 分离胶	3、 3.5 、4、 5 、6、7、 8、9
肝素钠 / 肝素锂	2、3、 4 、 5 、6、7、 8、9、10
氟化钠 + 草酸钾 氟化钠 + EDTA-K ₂ 氟化钠 + 肝素钠	2 、3、4、 5、6

添加剂	规格型号 (ml)
EDTA-K ₂ EDTA-K ₃	1、 2 、3、 4、4.5、 5 、 6、7、10
柠檬酸钠 1: 9	2 、3、5
柠檬酸钠 1: 4	1.6 、 2 、 2.4、3、4

* 加粗内容为常用规格型号

注意事项：

使用前，请参阅包装箱内随附的《使用说明书》中的操作方法、注意事项等。